

# GUEDEL CANNULA

## Caractéristiques Techniques

<b>Matières premières:</b>	fabriquée en Polyéthylène.
<b>Forme:</b>	anatomiquement correcte pour le patient.
<b>Surface:</b>	transparent et satin, douce, pointe arrondie qui empêche d'endommager les tissus. Flexibilité qui n'endommage pas les dents au cours de la morsure.
<b>Blocage de morsure:</b>	un bloc de morsure qui permet d'accéder à la sonde d'aspiration. Blocage de morsure de couleur selon la norme DIN 13273.
<b>Mesure de la sonde d'aspiration maximale:</b>	CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
<b>Emballage:</b>	Stérile en sachet individuel pelable (papier + film).
<b>Stérilisation:</b>	effectué par un mélange de ETO + CO2
<b>Cladimed :</b>	R51CA02

## Informations pour l'utilisation

1. Avant l'insertion d'identifier la taille requise, la mesure de la longueur, ce sera généralement égale à la section comprise entre le lobe inférieur de l'oreille et le coin de la bouche.
2. Insérez délicatement la canule dans la bouche pointant vers le palais arrière (palais mou) jusqu'à ce qu'il aura du mal à poursuivre leur insertion dans la bouche.
3. Tourner le tube de 180 degrés et finir insert portant la buse en contact avec les lèvres. Le positionnement correct de la même maintient la languette adhérent à la bouche inférieure

Attention!

Pas repousser la langue lors de l'insertion de la canule dans la bouche.


La muqueuse de la cavité orale peut être enroulé à travers la canule, lorsque les opérations d'insertion et d'extraction ne sont pas exécutées correctement.

## Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec à température ambiante. Le produit doit être protégé de la chaleur et de la lumière solaire directe. L'entreposage doit éviter les températures élevées, une forte humidité, sans gaz érosive et avec une bonne aération

La stérilité est assurée pendant 5 ans, sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

## Photo et Dessin Technique

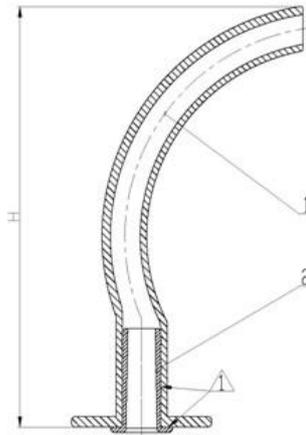

1. Airway
2. Reinforcement insert

## Codifications et emballage

<i>CODE</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>EMBALLAGE</i>
127141001024	Canule de Guedel sterile, taille 000 – longueur 40 mm Code couleur : Rose	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001026	Canule de Guedel sterile, taille 00 – longueur 50 mm Code couleur : Bleu	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001028	Canule de Guedel sterile, taille 0 – longueur 60 mm Code couleur : Noir	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001030	Canule de Guedel sterile, taille 1 – longueur 70 mm Code couleur : Blanche	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001032	Canule de Guedel sterile, taille 2 – longueur 80 mm Code couleur : Vert	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001034	Canule de Guedel sterile, taille 3 – longueur 90 mm Code couleur : Jaune	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001036	Canule de Guedel sterile, taille 4 – longueur 100 mm Code couleur : Rouge	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001038	Canule de Guedel sterile, taille 5 – longueur 110 mm Code couleur : Bleu ciel	50 pcs / boite – 500 pcs / carton
127141001040	Canule de Guedel sterile, taille 6 – longueur 120 mm Code couleur : Orange	50 pcs / boite – 500 pcs / carton

## Etiquetage (example)

Blister / Front Side - Pantone colour: GREEN 354 C



ANESTESIOLOGIA - ANESTHESIOLOGY - ANESTHESIOLOGIE

REF	XXXXXXXXXX	SIZE MEDIDA	0 - XX mm
I	CANNULA DI GUEDEL	<b>LOT</b>	XXXX-XX
GB	GUEDEL AIRWAY		XXXX-XX
F	SONDE DE GUEDEL		
P	TUBO DE GUEDEL		

OPEN  
ARROW 

Utilizzare solo a confezione integra. Distruggere dopo l'uso secondo le norme vigenti. Rischio di infezioni in caso di riutilizzo.  
Use only if package is undamaged. Destroy after use according to applicable regulation. Risk of infections in case of reuse.  
Vérifier que l'emballage soit intact avant utilisation. Détruire après usage selon la réglementation en vigueur. Risque d'infection en cas de réutilisation.  
Utilizar apenas se a embalagem estiver intacta. Destruir após utilização de acordo com os regulamentos. Risco de infecção no caso de reutilização.

---



  
0123



Via della Industrie 201  
36016 - THIENE (VI) - ITALY