

Fiche Technique

Pot de recueil de l'urine BD Vacutainer® avec canule de transfert intégrée

364941



Descriptif

Pot de recueil de l'urine, stérile, 120 ml, à usage unique
avec canule de transfert intégrée au couvercle.

Caractéristiques générales

- Matériaux**
- Pot : Polypropylène
 - Couvercle bleu : Polyéthylène
 - Etiquette : Papier
 - Canule de transfert intégrée au couvercle
 - Canule : Acier inoxydable
 - Manchon valve : Elastomère de synthèse
- Ne contient pas de latex - Ne contient pas de DNR*
- Fabricant**
- BD Broken Bow (USA)
Certification ISO 13485 : 2003 par le NSAI n° MD 19.2137
- Origine**
- USA
- Représentant européen**
- Becton, Dickinson and Company
Belliver Industrial Estate, Plymouth, Devon, PL6 7BP, UK
- Stérilité**
- Intérieur du pot stérile : 10⁻⁶ SAL
(SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité)
 - Mode de stérilisation: par irradiation (rayon Gamma) conforme à la norme ISO 11137 - Stérilisation des produits de santé – Irradiation.
- Marquage CE**
- Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro – Classe : non Annexe II
Directive européenne 98/79/CEE en vigueur depuis le 07/06/2000
Auto-déclaration de conformité (disponible sur demande)
- Conservation**
- Durée de vie du produit : 24 mois
 - Conditions de conservation : Tenir à l'abri des rayons solaires
- Conditionnement**
- Unité de vente (200 unités) : carton de 2 sachets plastique de 100 pots



Caractéristiques spécifiques

Référence du produit	364941
Diamètre de l'ouverture du pot	60 mm
Hauteur du pot	700 mm
Capacité	120 ml




Fiche Technique (suite)

Etiquetage

	Opercule autocollant	Carton 2 sachets de 100 pots
Nom du fabricant, division, adresse, pays de fabrication, représentant européen		x
Marque déposée Vacutainer et/ou marque déposée BD		x
Référence du produit	x	x
Mention "STERILE" et mode de stérilisation	x	x
Marquage CE, Produit à usage unique	x	x
N° de lot, date de péremption	x	x
Visualisation du produit, Conditions de conservation		x
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		x
Recommandations d'utilisation (sous forme symbolique)	x	
Code à barre primaire (GS1-128): identification produit		x
Code à barre secondaire (GS1-128) : quantité, date de péremption, n° de lot		x

Recommandations d'utilisation

A - Recueil de l'échantillon d'urine (patient)

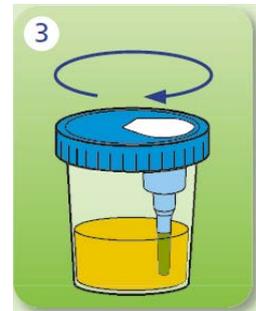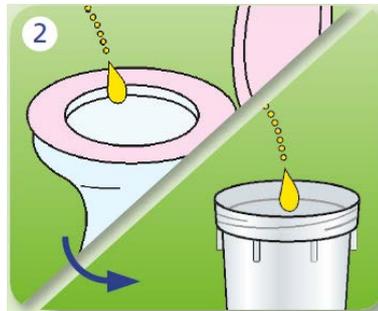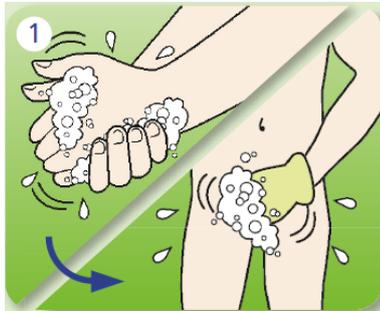



Précautions : Ne pas soulever l'étiquette blanche.



Ne pas toucher la canule intégrée.



B – Transfert de l'échantillon dans le tube BD Vacutainer® sous-vide

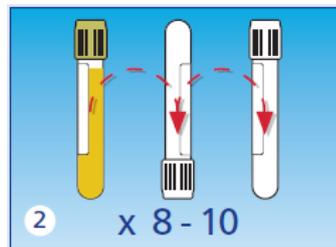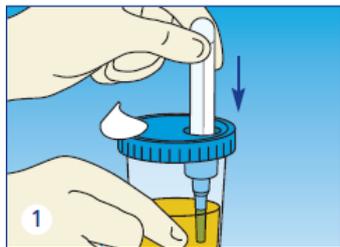

- Veiller à remplir le tube jusqu'au repère de remplissage minimum indiqué sur l'étiquette

Ordre de prélèvement

Dans le cas d'un prélèvement de plusieurs tubes pour l'analyse d'urine, il est recommandé de respecter l'ordre suivant :

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT DES TUBES



Traitement et conservation

- Le mélange d'additifs assure une conservation de l'échantillon jusqu'à 48h à température ambiante

PU2 / Pot Urine 120 ml / Décembre 2013