


## FICHE TECHNIQUE

### Description

L'aiguille spinale BD™ Whitacre peut être utilisée :

- pour la rachianesthésie,
- pour des prélèvements de liquide céphalo-rachidien.

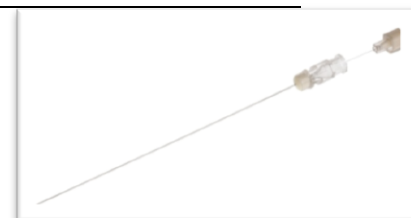

### Caractéristiques Générales

Le design de l'embout de cette aiguille est en "pointe de crayon".

L'ouverture latérale est proche de la pointe et permet la diffusion des agents anesthésiques dans le LCR.

L'embase transparente de l'aiguille BD™ Whitacre permet la visualisation rapide du reflux du LCR.

Le positionnement du mandrin dans l'embase de l'aiguille aide à orienter le biseau de l'aiguille.

### Composition

Composant	Matériau
Aiguille	Acier inoxydable
Embase de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Capuchon de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase du mandrin	Polypropylène (PP) + colorant



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### **BD™ Whitacre**

Toutes les références sauf 409442, 409443, 405260 et 405261

Marquage CE n°2010 02 0700 ET, AEMPS 0318 : Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico (fabrication) et Becton Dickinson, San Agustin, Espagne (assemblage) / Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Certification : EN ISO 13 485:2012 certificat n°MD19.1805, certifié par NSAI 0050 pour Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico ; ISO 13 485:2003 certificat n°2012 07 0013EN, certifié par AEMPS 0318 pour Becton Dickinson, San Agustin, Espagne.

Pour les références : 409442 et 409443 :

Marquage CE n°2010 02 0699ET, AEMPS 0318 : Classe III (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Juncos, Puerto Rico / Becton Dickinson, Franklin Lakes, USA.

Certification : ISO 13 485:2012 certificat n°MD19.1805, certifié par NSAI 0050.

Pour les références 405260 et 405261

Marquage CE n°95 06 0005 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Référence	Gauge	Couleur	Longueur		Ø interne	Ø externe	Conditionnement
			En mm	En inch	En mm	En mm	(Boîte / Carton)
<b>Aiguille BD™ Whitacre</b>							
401995	22G	Noir	90	3 ½	0,39	0,70	25 / 200 Unités
405104	24G	Violet	90	3 ½	0,37	0,55	
402050	25G	Bleu	90	3 ½	0,28	0,50	
405110			103	4 <sup>1/16</sup>			
409442			119	4 <sup>11/16</sup>			10 / 50 Unités
402051	27G	Gris	90	3 ½	0,27	0,40	25 / 200 Unités
409443			119	4 <sup>11/16</sup>			10 / 50 Unités
<b>Introducteurs</b>							
405260	20G pour les aiguilles 25G	Jaune	32	1 ¼	0,62	0,90	25 / 200 Unités
405261	22G pour les aiguilles 27G	Noir	32	1 ¼	0,43	0,70	
<b>Kit aiguille BD™ Whitacre et Introducteurs</b>							
405112	Aiguille 25G Introducteur 20G	Bleu Jaune	103	4 <sup>1/16</sup>	0,28	0,50	25 / 200 Unités
405076			90	3 ½			
405113	Aiguille 27G Introducteur 22G	Gris Noir	103	4 <sup>1/16</sup>	0,27	0,40	
405075			90	3 ½			