

Lame chirurgicale "FINE" stérile Swann-Morton



Se monte sur un manche de la gamme "FINE"

N° / Référence Produit - lame double biseau			
SM61 Réf. 5901	SM62 Réf. 5902	SM64 Réf. 5904	SM65 Réf. 5905
SM65A Réf. 5906	SM67 Réf. 5907	SM68 Réf. 5908	

N° / Référence Produit - lame simple biseau			
SM61S Réf. 5911	SM62S Réf. 5912		

N° / Référence Produit - lame spéciale			
SM63 Réf. 5903	SM69 Réf. 5909	SP90 Réf. 5921	SP91 Réf. 5922

Produit	Lame "FINE" en acier inoxydable à usage unique jetable		
Unité de vente	Boite de 25 unités		
Conditionnement usine	-		
Stérilisation	Irradiation au Cobalt 60 à un minimum de 25kGy par Swann-Morton (Services) Ltd, Owlerton Green, Sheffield S6 2BJ Grande Bretagne.		
Matériau	Lame en acier inoxydable SF100 – Qualité chirurgicale - Epaisseur de lame 0.394 mm - Conforme à la norme BS 2982		
	<u>Composition de l'acier</u>	Carbone : 0,60% - 0,70%	Chrome : 12,0% - 13,5%
		Silicium : 0,50% max.	Souffre : 0,025% max.
		Phosphore: 0,03% max.	Nickel : 0,50% max.
Composition emballage	Boite :	Carton jaune pelliculé – Visuel et caractéristiques du produit bien lisibles	
	Individuel :	Partie supérieure du feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène Partie inférieure du feuillet en aluminium imprimée et filmée en Polyéthylène organique moulée au format de la lame Intérieur du feuillet : inhibiteur de corrosion vaporisé sur papier Kraft brun	
Sécurité	Petites lames minces et précises en acier inoxydable pour opérations délicates dans sites opératoires réduits. Nombreuses indications en chirurgie plastique, orthopédique, vasculaire, cardio-vasculaire, gynécologique, en neurochirurgie et ORL. S'utilise avec tous les manches de la gamme "FINE". Dispositif médical réservé aux professionnels de santé		
Directive	Classe IIa - Directive MDR 2017/745 - Certificat (EU) MDR 721051 R000 - Directive 93/42/CEE - CE 00482 - Déclaré à l'ANSM depuis le 18 Juillet 2013		
Normes	Norme Matériaux : BS2982 - Organisme certificateur BSI marquage CE2797- GMDN 16224 - CLADIMED F52AK01. Fabrication Grande-Bretagne : Lames fabriquées par l'usine Swann-MortonLtd à Sheffield		
Marquage	Etiquetage : code GS1 conforme à l'UDI enregistré sous le numéro 503395500004 – QR code au format Datamatrix avec indication de la référence, du N° de lot et de la date de péremption.		
Conservation	Environnement propre et sec - entre 0 et +40°C - ne pas exposer près d'une source de chaleur.		
Péremption	5 ans à partir de la date de stérilisation, indiquée sur les emballages		
Elimination	Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.		
Contact	Swann-Morton/Sinner - ZA du Verdal'ai - 13790 Peynier - 04 42 29 08 08 - services@swann-morton-sinner.com		

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT

Lame chirurgicale « FINE » stérile

1-Produit




2-Emballage primaire : individuel pour chaque produit

LOT	4401701
EXP	2022 07
REF	****



*Information marquage

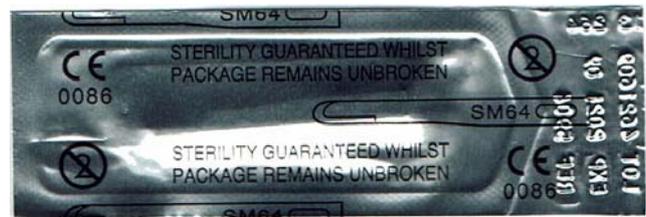

* Référence sur sachet unitaire

Inhibiteur de corrosion en papier kraft



3-Emballage secondaire - boîte de 25 : unité de vente



Lecture du marquage sur l'emballage unitaire : lames chirurgicale "FINE" stérile

LOT 0561504

056 = 3 chiffres séquentiels
 20 = Année de stérilisation
 04 = Mois de stérilisation

EXPIRATION

2025 = Année d'expiration
 04 = Mois d'expiration
 (expiration = 5ans)

REF 5907 = Référence produit

15 = numéro de machine de fabrication

LOT 0562004
 EXP 2025 04
 REF 5907

15
 114

114 = numéro du jour de fabrication sur l'année de stérilisation (voir correspondance tableau ci-joint, ici = 2015)

2797 = numéro CE
 CE = Marquage CE

STERILE R

Produit stérile par irradiation

Marque = Swann-Morton

② Usage unique

 Stérilité assuré par la non ouverture du scellement

Désignation du produit



Traduction :
 "ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé"

Adresse du fabricant

Classification et codes produits

CODE USINE	REF ARTICLE	DESIGNATION	Classe	Dispositifs Médicaux	Marquage CE	CODE GMDN	CODE CLADIMED	NOMENCLATURE DOUANIERE	CODE UDI
5901	SM61	LAME FINE STERILE N°61	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059019
5911	SM61S	LAME FINE STERILE N°61S	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059118
5902	SM62	LAME FINE STERILE N°62	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059026
5912	SM62S	LAME FINE STERILE N° 62S	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059125
5904	SM64	LAME FINE STERILE N°64	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059040
5905	SM65	LAME FINE STERILE N°65	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059057
5906	SM65A	LAME FINE STERILE N°65A	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059064
5907	SM67	LAME FINE STERILE N°67	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059071
5908	SM68	LAME FINE STERILE N°68	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059088
5903	SM63	LAME FINE STERILE N°63	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059033
5909	SM69	LAME FINE STERILE N°69	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059095
5921	SP90	LAME FINE STERILE N°90	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059217
5922	SP91	LAME FINE STERILE N°91	IIA	DM	CE 2797	37445	F52AB01	90189084	5033955059224