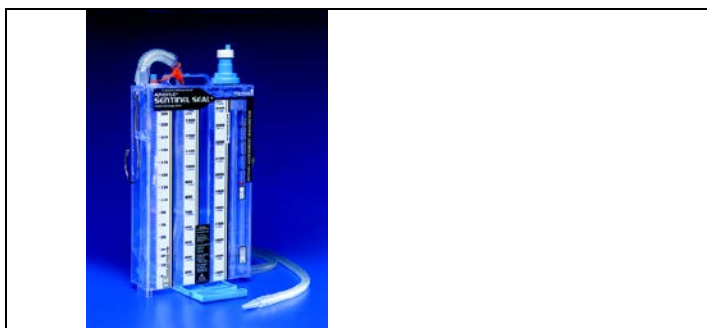


NOM DU PRODUIT

**ENSEMBLE DE DRAINAGE THORACIQUE à usage unique
SYSTÈME 4 BOUTEILLES COMPACT**

DENOMINATION

**SENTINEL SEAL®
Argyle™**


MATÉRIAU :

Bouteille : K-b résine butadiène styrène polymère
Tubulure : Kraton

STÉRILISATION :

Oxyde d'éthylène - Péréemption : 60 mois

EMBALLAGE :

Triple

MARQUE CE

Classe	Organisme notifié	N° certificat	N° déclaration conformité
I stérile	NSAI	97 Q 252.239	T-005B

Caractéristiques techniques :

- Chambre de recueil entièrement transparente de 2 500 ml divisée en trois compartiments qui se remplissent par débordement.
- Poids : 1,2 kg.
- Dimensions : 44,2 x 23,5 x 8,7 cm.
- Graduations de la chambre de recueil :
 - par incrément de 1 ml de 0 à 12 ml,
 - par incrément de 1 ml de 12 à 250 ml,
 - par incrément de 10 ml de 280 à 2 500 ml.
- Tubulure de 1,80 m de longueur pour le raccordement au drain, avec connecteur distal mâle universel dégradé anti-recul.
- Valve de compensation des pressions négatives excédentaires.
- Valve d'évacuation de pressions positives.
- Admission du vide régulée par un manomètre détenteur à membrane, totalement silencieux avec tubulure et raccord « universel »
- Manomètre à eau de contrôle permanent de la dépression réellement appliquée au patient.
- Poignée de transport.
- Support au sol rotatif et crochets de suspension
- Système de remplissage aisé de la sécurité sous eau et site d'ajustement du niveau.
- Chambre de sécurité sous eau avec clapet anti-débordement.

Référence

8888 571 562

Unité d'emploi

1

Unités protégées

5

Unités de commande

5

PROVENANCE : COVIDIEN IRELAND Ltd