

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA



CATALOGUE **UROLOGIE & SOIN RECTAL**

Le spécialiste de la distribution
de dispositifs médicaux à usage unique.

Edition 2025

BIENVENUE

CHEZ KELIS MEDICAL - APOTECNIA

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



ÉQUIPE TERRAIN

Un interlocuteur unique pour toutes vos demandes, grâce à une équipe réactive et à un commercial implanté dans votre région.



EXPÉDITION RAPIDE

Nous nous engageons à traiter vos commandes dans les 24 à 48 heures.



RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Sélection de consommables adaptés à vos besoins : marques renommées, génériques de qualité, tarifs compétitifs.



FLÉXIBILITÉ

Quantités et produits ajustés à vos besoins avec un catalogue constamment mis à jour. Solution personnalisée pour un service optimal.

SOMMAIRE

04

INFORMATIONS TECHNIQUES

Les sondes urinaires	05
Les poches urinaires	06

06

UROLOGIE

Sonde intermittente - Non lubrifiée	09
Sonde de Foley	10
Sonde de Foley - 2 voies	10
Sonde de Foley préconnectée	11
Système urinaire préconnecté	11
Poche urinaire non stérile	12
Poche urinaire stérile avec site de prélèvement	13
Tubulure d'irrigation pour sonde urinaire	13
Crochet pour poche urinaire	14
Fosset pour sonde urinaire	14
Pot de recueil urinaire vacutainer	14
Tube vacutainer prélèvement urinaire	14
Collecteur d'urine	15
Bassin	15
Haricot	15

09

SOIN RECTAL

Sonde rectale	16
---------------------	----

10

SETS DE SOINS URINAIRE

Set de sondage urinaire a demeure	17
---	----

LES SONDES URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

SONDAGE INTERMITTENT


Pose d'une sonde vésicale pour assurer un drainage ponctuel

- Insertion par le méat jusqu'à la vessie
- Unique (chirurgie) ou répété (slérose en plaque, paraplégie...)
- Retiré à la fin de la vidange

2 types de sondage intermittent :

Autosondage par le patient

Hétérosondage réalisé par une tierce personne formée (IDE...)

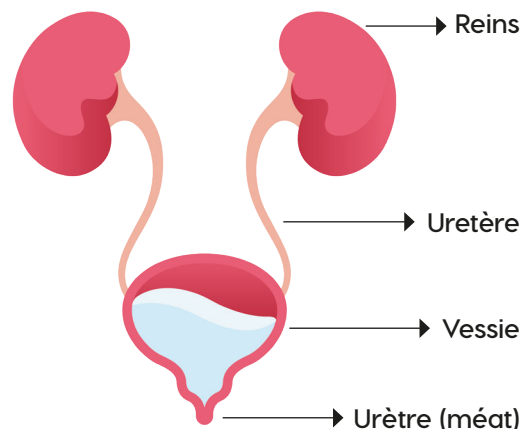

SONDAGE À DEMEURE


Pose de sonde à ballonnet pour assurer un drainage continu

- Aussi appelé **Sonde de Foley**.
- En système clos = sonde + collecteur assemblés
- **Risque infectieux** : à la pose et une fois en place

CHOISIR UNE SONDE ET MIEUX COMPRENDRE VOS BESOINS

Afin de mieux vous accompagner dans le choix de la sonde urinaire à utiliser, nous vous proposons un arbre décisionnel qui vous aidera à clarifier les différentes options disponibles et évaluer vos choix en fonction des critères prédéfinis correspondant à vos besoins.


CHOIX POUR LE SONDAGE URINAIRE

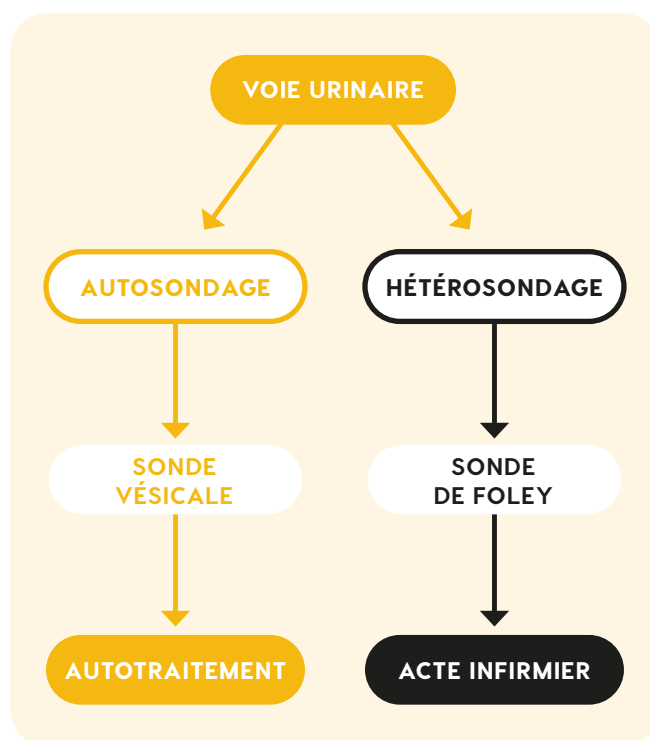


	INTERMITTENTE	À DEMEURRE
MATÉRIAU	PVC (auto)lubrifiant	<ul style="list-style-type: none"> Latex siliconé / téflon : 7-15 jours Latex + hydrogel } 4-6 semaines 100% silicone
LONGUEUR	18 - 23 - 38 - 40 cm ♀ ♂	28 - 30 - 40 cm
DIAMÈTRE EXTERNE	CH06 - CH18	CH06 - CH18
ASPECT	Béquillée ou droite <ul style="list-style-type: none"> Type Nelaton : droite ♀ ♂ Type Tiemann : béquillée ♂ 	
EXTRÉMITÉ DISTALE	Sans ballonnet	Avec ballonnet <ul style="list-style-type: none"> Matériau : latex ou silicone Gonflage : eau stérile (<i>pas sérum phy.</i>) Volume remplissage : 3-50ml Avec valve anti-retour (<i>remplissage</i>)
EXTRÉMITÉ PROXIMALE	Godet	
TYPE	Classe I, stérile	

LES SONDES DE FOLEY

SIMPLE COURANT | DRAINAGE

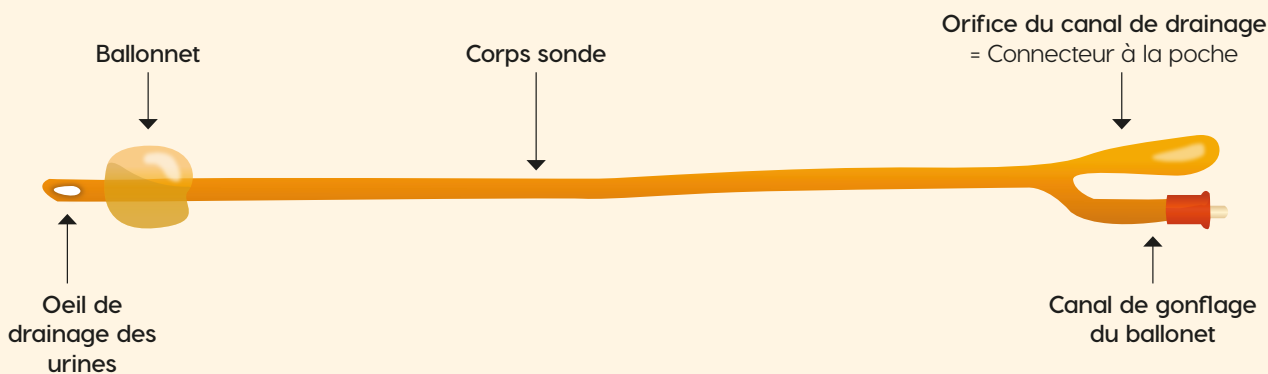

DOUBLE COURANT | IRRIGATION

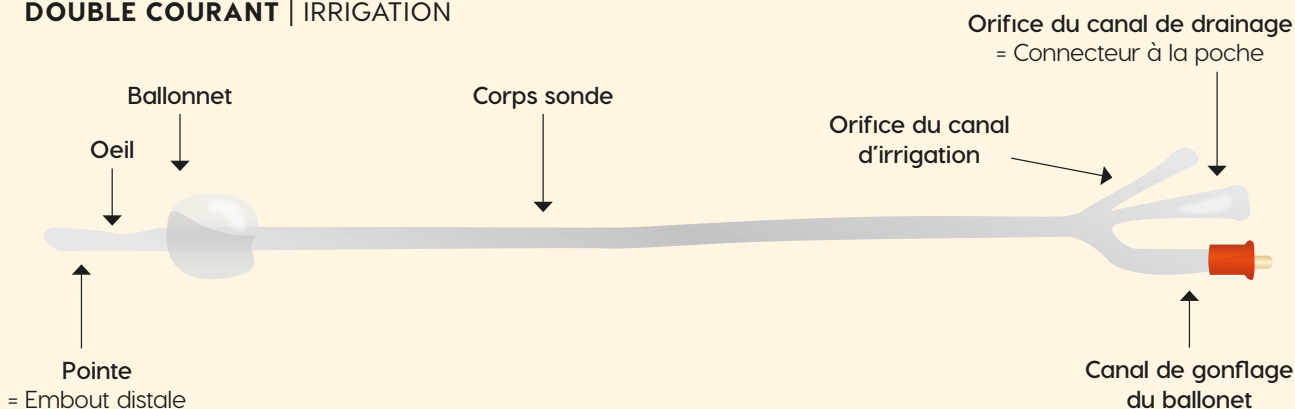

LES POCHE URINAIRES

COMMENT CHOISIR ?

Votre choix dépendra de vos besoins : nature de l'application, la nécessité de stérilité, la réutilisation envisagée et les considérations budgétaires.

La poche urinaire (ou collecteur d'urine) est destinée à être raccordée à :

- Une sonde urinaire
- Un étui pénien
- Un cathéter sus-pubien
- Une poche de stomie urinaire

Certaines poche urinaires non-stériles peuvent être utilisées en digestif

LES DIFFÉRENTES TYPES DE POCHE


- **Poche stérile intérieur uniquement** (extérieur non stérile) = poche « non stérile »*
- **Poche stérile intérieur et extérieur** = poche « stérile »
- Poche avec / sans site de prélèvement, chambre compte-gouttes, filtre...
- **Urimètre** : spécifique à la surveillance de la diurèse horaire

* La poche de récupération sert à vidanger la poche urinaire en place

LE SYSTÈME LOS

Système clos = aucune déconnexion entre la sonde urinaire et la poche urinaire

- Concerne le **sondage à demeure**
- **Recommandation R76 de la SF2H :**
 - La SAD doit être connectée à un sac collecteur stérile permettant un drainage clos
 - S'assurer que le système ne peut être déconnecté en dehors d'impératifs cliniques (changement de sac selon les recommandations du fabricant...).

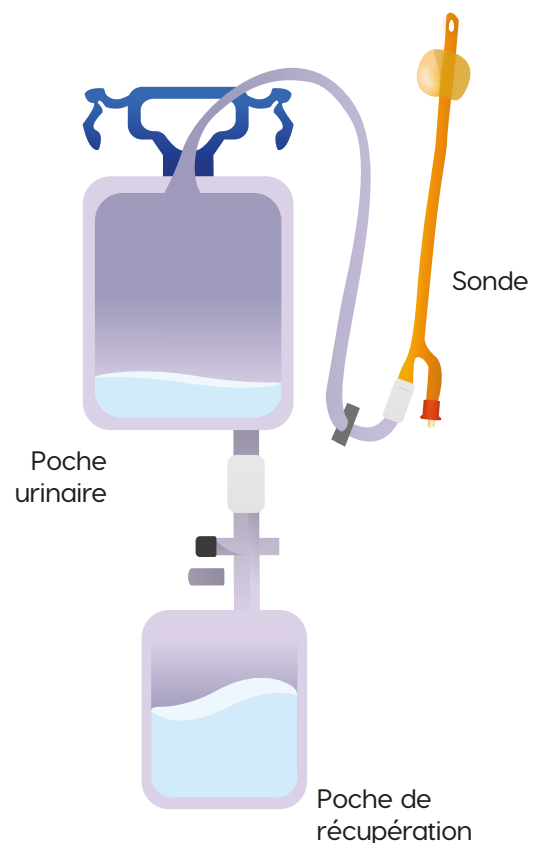

INFORMATIONS TECHNIQUES

La durée maximale d'utilisation varie selon le type de poche et les données fabricant indiquées dans la notice.



1 SEMAINE

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX

POCHE AVEC
VALVE ANTI-REFLUX
+ CHAMBRE COMPTE-GOUTTES


	POCHE NON STÉRILE	POCHE STÉRILE
INDICATION	Intermittent	À demeure
AUTO INDICATION	Etui pénien	-
CONTENANCE	2L	2L - 4L - 5L
SYSTÈME DE VIDANGE	ou <ul style="list-style-type: none"> • Robinet push & pull • Robinet en croix 	<ul style="list-style-type: none"> • Robinet push & pull • Robinet en croix • Robinet pince crocodile
VALVE ANTI-REFLUX*	ou	
CHAMBRE DE GOUTTAGE		
CONDITIONNEMENT	En vrac ou individuellement	Individuellement

RECOMMANDATIONS DES BONNES PRATIQUES

	CARACTÉRISTIQUES		INDICATIONS			
	VALVE ANTI-REFLUX	CHAMBRE DE GOUTTAGE	UTILISATION ÉTUI PÉNIEN	SONDAGE INTERMITTENT	SONDAGE À DEMEURE	
					- 1 SEMAINE	+ 1 SEMAINE
POCHES NON STÉRILES						
POCHES STÉRILES						

SONDE INTERMITTENTE - NON LUBRIFIÉE

Longueur de 23 cm ou 38 cm
 PVC de qualité médicale
 Pochettes individuelles stériles, à pelage
 100 unités par sac intérieur en polyéthylène
 Sans latex et sans DEHP

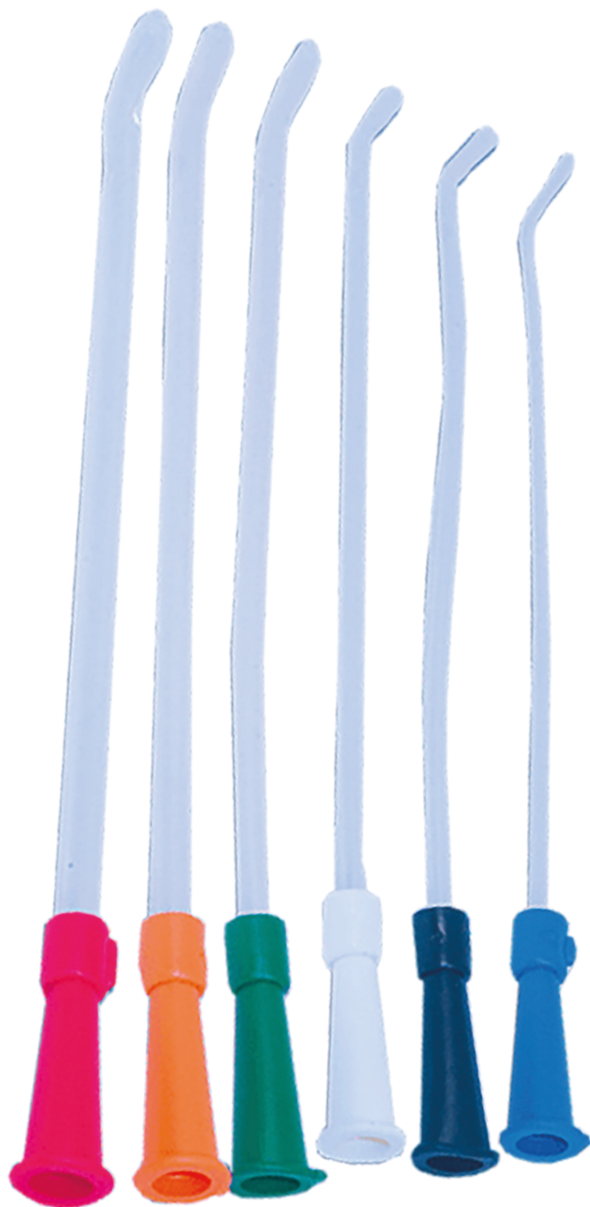

REF. FC-1406/1

Boite de 100 UVC

CH06 - 23CM | VERT CLAIR

REF. FC-1408/1

Boite de 100 UVC

CH08 - 23CM | BLEU CLAIR

REF. FC-1410/1

Boite de 100 UVC

CH10 - 23CM | NOIR

REF. FC-1412/1

Boite de 100 UVC

CH12 - 23CM | BLANC

REF. FC-1414/1

Boite de 100 UVC

CH14 - 23CM | VERT FONCÉ

REF. FC-1416/1

Boite de 100 UVC

CH16 - 23CM | ORANGE

REF. FC-1418/1

Boite de 100 UVC

CH18 - 23CM | ROUGE

REF. NC-1208/SW/1

Boite de 100 UVC

CH08 - 38CM | BLEU CLAIR

REF. NC-1210/SW/1

Boite de 100 UVC

CH10 - 38CM | NOIR

REF. NC-1212/SW/1

Boite de 100 UVC

CH12 - 38CM | BLANC

REF. NC-1214/SW/1

Boite de 100 UVC

CH14 - 38CM | VERT FONCÉ

REF. NC-1216/SW/1

Boite de 100 UVC

CH16 - 38CM | ORANGE

REF. NC-1218/SW/1

Boite de 100 UVC

CH18 - 38CM | ROUGE

SONDE DE FOLEY

La Sonde de Foley en Latex Siliconé *Securdrain Vià!* est idéale pour les utilisations à courte ou moyenne durée.



REF. 11601322121

Boite de 10 UVC

CH12 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322141

Boite de 10 UVC

CH14 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322161

Boite de 10 UVC

CH16 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322181

Boite de 10 UVC

CH18 41CM | LATEX SILICONÉ

REF. 11601322201

Boite de 10 UVC

CH20 41CM | LATEX SILICONÉ



SONDE DE FOLEY - 2 VOIES

La Sonde de Foley en 100% Silicone *Securdrain Vià!* est idéale pour les utilisations à longue durée (29 jours) et pour les patients allergiques au latex, grâce à la biocompatibilité du matériau.

REF. 11501222121

Boite de 20 UVC

2 VOIES | CH12 21CM • 100% SILICONE

REF. 11501322121

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH12 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322141

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH14 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322161

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH16 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322181

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH18 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322201

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH20 41CM • 100% SILICONE

REF. 11501322221

Boite de 10 UVC

2 VOIES | CH22 41CM • 100% SILICONE



SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE

Le système SM Tray BasicS préconnecté est adapté au cathétérisme de longue durée et réduit le nombre d'opérations manuelles nécessaires aux professionnels de santé.



REF. 0100112E21CA Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH12 • 100% SILICONE

REF. 0100112E21CB Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH14 • 100% SILICONE

REF. 0100112E21CC Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH16 • 100% SILICONE

REF. 0100112E21CD Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH18 • 100% SILICONE

REF. 0100112E21CE Boite de 40 UVC

POCHE 2 LITRES | CH20 • 100% SILICONE



SONDE DE FOLEY PRÉCONNECTÉE

Le système pré-connecté SM Tray BasicL est utilisé pour la cathétérisation à moyenne durée, c'est un appareil prêt à l'emploi car il réduit le nombre de manipulations.



REF. 0100111C22BB Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH14 • 90CM SONDE LATEX

REF. 0100111C22BC Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH16 • 90CM SONDE LATEX

REF. 0100111C22BD Boite de 50 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | CH18 • 90CM SONDE LATEX

SYSTÈME URINAIRE PRÉCONNECTÉ

Le système de drainage urinaire préconnecté combine un sac de collecte d'urine et un cathéter de Foley en silicone à double voie. Le sac recueille l'urine et le cathéter est inséré dans la vessie pour une cathétérisation à demeure.



REF. M06059

Boite de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH12

REF. M06061

Boite de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH14

REF. M06062

Boite de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH16

REF. M06063

Boite de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH18

REF. M06064

Boite de 20 UVC

SYST URI PRECO | CH20

POCHE URINAIRE NON STÉRILE

Système de poche non stérile utilisé pour la vidange de poche à urine.

REF. 001019017903

Boite de 200 UVC

POCHE 2 LITRES | NON VIDANGEABLE

REF. 001019037903

Boite de 200 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE B

REF. 008019017107

Boite de 400 UVC

SYST URI PRECO 2 LITRES | RECUPERATEUR + TUBU 10CM



POCHE URINAIRE STÉRILE AVEC SITE DE PRÉLÈVEMENT

La poche urinaire offre une capacité de 2, 4 ou 5 litres. Une construction sûre en PVC sans latex ni DEHP, avec une tubulure à section large pour éviter les obstructions, et un robinet en «T» facilitant la vidange. Stérilisée avec un mélange d'ETO + CO₂.



REF. 001011067908

Boite de 50 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE + AIGUILLE • SM4L

REF. 00101106790D

Boite de 100 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE • SM4L

REF. 004011E17903

Boite de 20 UVC

POCHE 2 LITRES | ROBINET + VALVE • SM7

REF. 004011G1A903

Boite de 20 UVC

POCHE 4 LITRES | ROBINET + VALVE • SM4000C

REF. 004011C2B903

Boite de 20 UVC

POCHE 5 LITRES | ROBINET + VALVE • SM5000C

Bexen

TUBULURE D'IRRIGATION POUR SONDE URINAIRE

Equipement pour l'irrigation urologique avec perforateur et chambre, régulateur de débit et extrémité distale avec un raccord en silicone lubrifié. Dispositif stérile utilisé dans l'irrigation par voie urologique d'une solution contenue dans une poche (091.01) ou de solutions contenues dans deux poches indépendantes (091.02).

REF. 091.01

Boite de 30 UVC

SIMPLE

REF. 091.02

Boite de 30 UVC

DOUBLE



CROCHET POUR POCHE URINAIRE

Crochet conçu pour assurer une fixation sûre de la poche à urine aux cadres de lit ronds ou carrés, ou à un fauteuil roulant.



REF. 514SUP05

Boite de 100 UVC

CROCHET POUR POCHE | PLASTIQUE


FOSSET POUR SONDE URINAIRE

Le fosset a été conçu pour s'adapter aux godets femelles des sondes vésicales en PVC. Il doit être retiré chaque fois que la vessie doit être vidée et lorsqu'il est nécessaire de changer la poche à urine.



REF. 20360 CURAS

Boite de 100 UVC

FOSSET SPIGOT

REF. 11201102001 SECURMED

Boite de 100 UVC

FOSSET BLEU | 45MM

POT DE RECUEIL URINAIRE VACUTAINER

Le système BD Vacutainer® simplifie et standardise la collecte d'urine en permettant un transfert direct vers les tubes identifiés par code couleur. Les échantillons peuvent être acheminés en toute sécurité au laboratoire, quel que soit le système de transport.



REF. 364941

Boite de 200 UVC

POT DE RECUEIL | VACUTAINER + CANULE • 120MM


TUBE VACUTAINER PRÉLÈVEMENT URINAIRE



Les tubes d'analyse d'urine en plastique BD Vacutainer™ facilitent la collecte et le transport des échantillons d'urine. Ils sont stériles et peuvent être évacués avec ou sans conservateur, et sont conçus pour être utilisés avec les dispositifs de prélèvement BD.

REF. 364955

Boite de 1000 UVC

TUBE VACU URI | 10ML

COLLECTIONNEUR D'URINEAPO
TECNIA

Dispositif conçu pour recueillir et contenir les urines des patients en toute hygiène. Fabriqué en pâte à papier moulée 100 % recyclée, il est usage unique pour prévenir les contaminations croisées et macérable pour une élimination simple et écologique.

REF. APO14001

Boite de 100 UVC

COLLECTEUR D'URINE | 875 MLAPO
TECNIA

Conçu pour minimiser les risques de contamination croisée. Fabriqué à partir de fibres de cellulose 100 % recyclées, respectueux de l'environnement.
Élimination : macérable, compatible avec les broyeurs hospitaliers.

REF. APO14002

Boite de 100 UVC

BASSIN JETABLE POUR CHAISE | 2000 ML

REF. APO14003

Boite de 100 UVC

BASSIN DE LIT**BASSIN****HARICOT**APO
TECNIA

Récipient ergonomique utilisé pour recueillir des liquides, déchets médicaux ou instruments lors des soins. Conçu en pâte à papier moulée 100 % recyclée. Usage unique pour limiter les risques de contamination croisée et macérable pour une élimination facile.

REF. APO14004

Boite de 300 UVC

HARICOT

SONDE RECTALE

La sonde rectale Securflow Vià! est indiquée pour l'administration de médicaments et aussi pour le drainage rectal. Il a une longueur de 40 cm, une extrémité ouverte et 2 yeux atraumatiques.



REF. 11214100401 Boite de 100 UVC
CH18 - 40CM

REF. 11214100408 Boite de 100 UVC
CH20 - 40CM

REF. 11214100402 Boite de 100 UVC
CH22 - 40CM

REF. 11214100409 Boite de 70 UVC
CH24 - 40CM

REF. 11214100410 Boite de 70 UVC
CH26 - 40CM

REF. 11214100404 Boite de 70 UVC
CH28 - 40CM

REF. 11214100405 Boite de 70 UVC
CH30 - 40CM

Innoset est un assembleur et distributeur de nécessaires de soins stériles depuis plus de 20 ans.

Intégrée au groupe Lavorel Medicare France depuis 2018, dont le siège social est situé à Lyon, Innoset est également reliée à la société Kelis Médical (distributeur de dispositifs médicaux à usage unique).

Située à Escalquens, la société Innoset a récemment développé son activité avec l'ouverture d'un nouveau site de production : Pharmaset.

Ce nouvel espace de 4800 m² est localisé à Sousse (Tunisie) et dispose d'une zone de stockage de plus de 3000 m².



SET DE SONDRAGE URINAIRE A DEMEURE

RÉFÉRENCE : UR-SAD-01

- 1 Essuie-mains Airlaid 20 x 30 cm
- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 2 x 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Champ de table enveloppant Ouate 50 x 60 cm

Dans le champ enveloppant :

- 1 Paire de gants Nitrile Manchettes Retournées Taille 7 / 8
- 5 Compresses Non tissées 7,5 x 7,5 cm
- 1 Pince Kocher
- 1 Champ patient Ouate fenêtre 10 cm centrée 75 x 75 cm
- 1 Seringue Luer Lock 20 ml
- 1 Aiguille Pompeuse 18G
- 1 Ampoule EPPI 20 ml protégée

1 SACHET DE GEL LUBRIFIANT

2 SACHETS DE GEL HYDROALCOOLIQUE

1 SAC DASRI



NOS CERTIFICATIONS



INNOSET est certifié par l'organisme notifié LNE-GMED

- NF EN ISO 13485
- ISO 11135 - Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène
- Certification règlement 2017/745 EU-MDR selon l'annexe IX – Chapitres 1 et 3 limité à l'obtention et au maintien de l'état stérile.

KELIS
MEDICAL

APO
TECNIA

LE SPÉCIALISTE DE LA DISTRIBUTION
DE DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE UNIQUE

SIÈGE SOCIAL

LAVOREL MEDICARE FRANCE

75 rue Cuvier
69006 LYON

KELIS MEDICAL - APOTECNIA

840 Rue de l'Hers
31750 Escalquens

CONTACTEZ-NOUS

✉ serviceclient@kelis-medical.com

☎ 04 42 18 52 00

Du lundi au vendredi
de 9h à 13h00 et de 14h00 à 17h



RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES ET CATALOGUES SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.KELIS-MEDICAL.COM

Centrales & groupements - Revendeurs - Prestataires de santé à domicile - Établissements de soins

Lavorel Medicare France, SAS au capital de 20 000€ - 539 073 221 RCS Lyon - Catalogue Edition 2024